


die Führungsscheibe darf nicht größer als 28 mm sein !

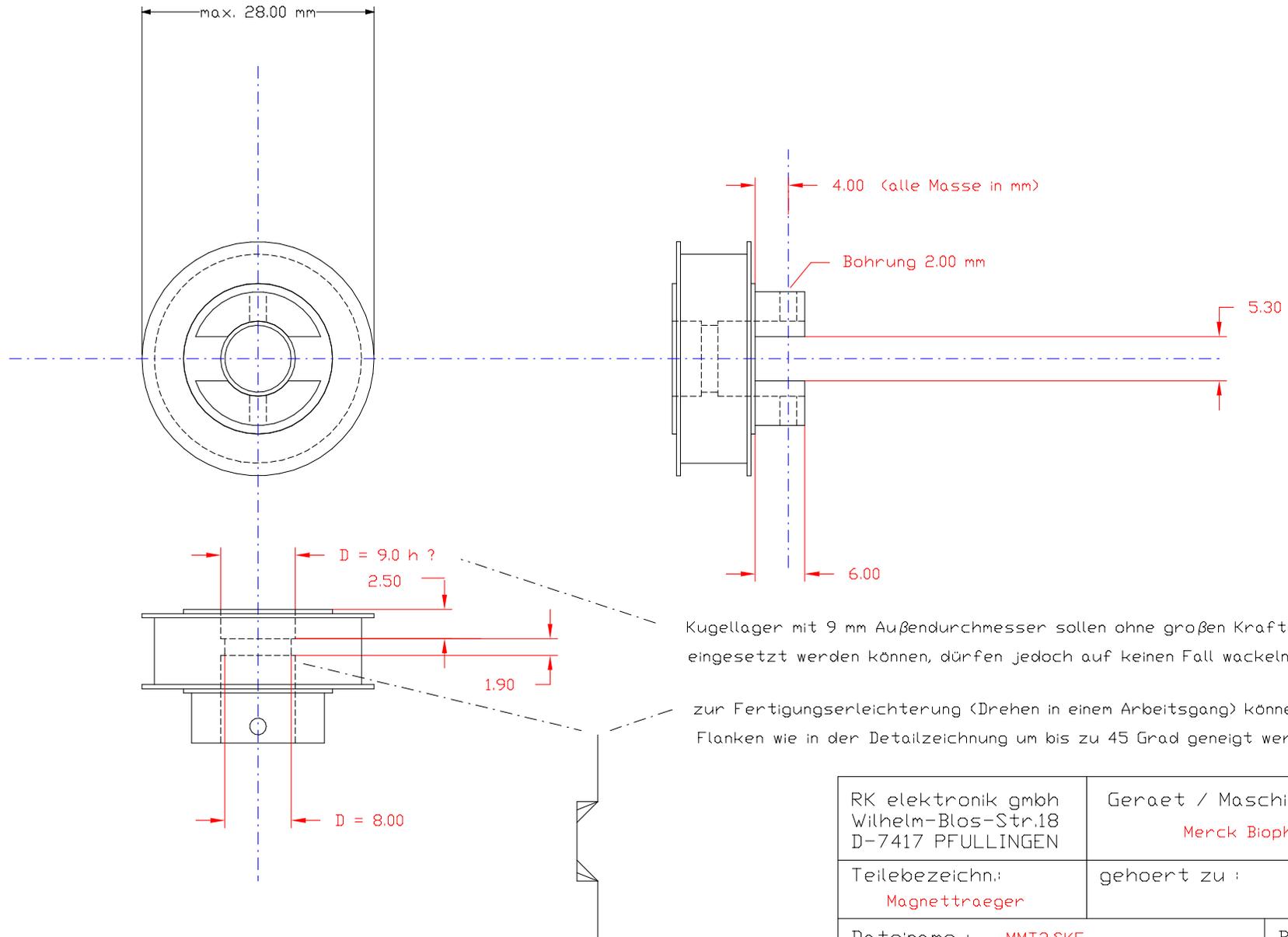

Kugellager mit 9 mm Außendurchmesser sollen ohne großen Kraftaufwand eingesetzt werden können, dürfen jedoch auf keinen Fall wackeln !

zur Fertigungserleichterung (Drehen in einem Arbeitsgang) können die Flanken wie in der Detailzeichnung um bis zu 45 Grad geneigt werden.

Rohteil Synchroscheibe LS16T2.5/32-2Nabe d 16 x 6

RK elektronik gmbh Wilhelm-Blos-Str.18 D-7417 PFULLINGEN	Gerät / Maschine / Projekt: Merck Biophotometer	
Teilebezeichn.: Magnettraeger	gehört zu :	Form. A 3
Dateiname : MMT2.SKF	Blatt 1	von 1
Aender.-index: 3	Datum: 23.7.03	bearb.: RK